

# Cateteri vescicali

Guida informativa agli ausili in commercio

## n.04

Opuscolo informativo

a cura della **Terapia Occupazionale**  
Istituto di Montecatone



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Istituto di Montecatone

Ospedale di riabilitazione

**MONTECATONE**  
REHABILITATION INSTITUTE S.p.A.

# Indice

<b>Introduzione</b>	<b>03</b>
<b>Il cateterismo vescicale</b>	<b>04</b>
Le caratteristiche	<b>05</b>
<b>Elenco delle ditte</b>	<b>07</b>
B. Braun Milano S.p.A.	<b>08</b>
Bard	<b>10</b>
Coloplast S.p.A.	<b>12</b>
Hollister S.p.A.	<b>14</b>
Manfred Sauer S.r.l.	<b>16</b>
Teleflex Medical S.r.l.	<b>19</b>
Wellspect HealthCare S.r.l.	<b>21</b>

# Introduzione

In questo fascicolo sono riepilogate alcune informazioni utili per le persone con disabilità che utilizzano cateteri vescicali:

- Informazioni generali sul cateterismo e sulle caratteristiche generali degli ausili da utilizzare
- Elenco di ditte fornitrici di ausili per il cateterismo, con caratteristiche dei prodotti e relativi contatti. L'elenco è puramente ricognitivo: ogni paziente è invitato a scegliere il prodotto più funzionale per le proprie esigenze, in base alle proprie valutazioni e senza condizionamenti esterni


*NB Il fascicolo sarà oggetto di aggiornamento alla data del 30 giugno 2024; a tal fine, chiunque volesse segnalare informazioni aggiuntive può rivolgersi all'URP di Montecatone:*

Tel. 0542 632842

E-Mail: [urp@montecatone.com](mailto:urp@montecatone.com)

# Il cateterismo vescicale

informazioni generali e caratteristiche degli ausili

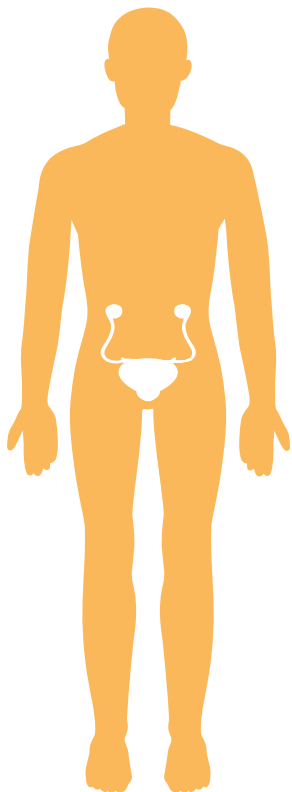

In caso di vescica neurogena (cioè di un disturbo del meccanismo fisiologico di riempimento-svuotamento della vescica a causa di una patologia neurologica), è necessario ricorrere a cateteri che, utilizzati a intermittenza, consentono lo svuotamento della vescica stessa.

Il catetere può essere di vario tipo, calibro e lunghezza (per l'uomo è più lungo rispetto a quello per donna); nella confezione solitamente è presente un lubrificante per consentire la scorrevolezza durante l'inserimento nell'uretra.

La manovra è semplice e può essere praticata non solo dai professionisti sanitari, ma anche dalla persona interessata o dai caregivers, dopo addestramento da parte del personale (il caregiver può essere addestrato anche dallo stesso utente quando, a sua volta, sia addestrato e consapevole, dopo la dimissione dall'ospedale, cioè nel corso della propria vita).

Il cateterismo può essere effettuato in ogni luogo, permettendo così il raggiungimento di un'elevata autonomia e indipendenza. In ospedale la manovra deve essere sterile (utilizzando un guanto sterile) a causa dell'elevato rischio di contrarre infezioni ospedaliere, mentre in ambiente extra ospedaliero può essere sia sterile che semplicemente pulita (effettuando un accurato lavaggio delle mani ed una appropriata igiene intima).

L'autocateterismo "NO TOUCH" consiste nell'utilizzo di cateteri predisposti con una guaina che permette la presa senza il contatto diretto della mano con il catetere stesso, è una manovra semplice e sicura e può essere eseguita fuori dall'ospedale con qualsiasi tipo di catetere in commercio.

Tutte le marche ed i modelli di catetere ad intermittenza possiedono caratteristiche tali da consentire l'utilizzo dell'ausilio con tecnica "NO TOUCH".

Sul mercato esistono numerose aziende produttrici di cateteri e ognuna di esse presenta diversi modelli. Ogni persona può trovare caratteristiche diverse nei cateteri reperibili, che le consentono di individuare il modello più adatto.

**LE CARATTERISTICHE** da tenere presenti per la scelta del catetere sono:

- la tipologia di **autolubrificazione**: quelle più diffuse sono l'idrofilica o a gel, devono essere scelte in base alle caratteristiche fisiologiche della persona;
- la tipologia di **punta**: i tipi più diffusi di punta sono Nelaton (estremità prossimale arrotondata e rettilinea dotato di 1 o 2 fori di drenaggio contrapposti), punta a testa tonda arrotondata e Tiemann (punta conica e angolata di 30° per assistiti con difficoltà all'ingresso in uretra);
- la tipologia di **rigidità**: vi sono diversi studi in merito alla possibilità di traumi dell'uretra in base alla rigidità del catetere; la priorità di scelta resta legata alla tollerabilità della persona, poiché a seguito di prove alcuni tollerano meglio i cateteri rigidi, altri i morbidi;
- la tipologia di **sistema no touch**: i principali sono a guaina interna alla confezione, a guaina ricavata strappando la confezione o sfruttando la rigidità del catetere;
- la presenza o meno di **sacche integrate**: quasi tutte le ditte hanno studiato modelli di cateteri con sacca già integrata nella confezione con capacità media di circa 750 cc;
- le peculiarità delle **confezioni** in caso di difficoltà nella manualità;
- la possibilità di **utilizzo di ausili** facilitanti: molte ditte hanno sviluppato lo studio di ausili come abbassa pantaloni, accessori per migliorare le prese, ausili per peni retrattili, sistemi a specchio per le donne, divaricatori, condom con diverse caratteristiche di tipo e quantità di collanti.

I cateteri e gli altri ausili urologici necessari (esempio le sacche di raccolta dell'urina o i condom) verranno prescritti in prossimità della dimissione e forniti direttamente dall'ASL (o dalla Sede INAIL) di appartenenza. Ti consigliamo di informarti tempestivamente sulle modalità di fornitura contattando l'Ufficio Assistenza Protesica della tua ASL, in quanto alcune ASL effettuano una fornitura diretta tramite magazzino interno (con precisi orari di apertura al pubblico), altre demandano la consegna alle farmacie; inoltre gli ausili forniti potrebbero non essere della stessa marca e modello di quelli utilizzati a Montecatone, ma devono avere comunque caratteristiche tali da svolgere la stessa funzione.

Desideriamo infine ribadire e sottolineare che l'autocateterismo (o cateterismo a intermittenza) è fondamentale per la corretta gestione della tua vescica, nonché di strategica importanza per una buona qualità della tua vita e per la tua indipendenza. Ti invitiamo a riflettere sul numero di autocateterismi giornalieri e sulla durata della tua vita: ti sarà facile comprendere quante volte dovrai inserire un catetere nella tua uretra e pertanto quanto sia importante praticare questa tecnica con la massima attenzione. Diventerà per te una manovra consueta il cui successo sarà legato ad elementi quali l'igiene delle mani, una adeguata igiene intima, l'appropriatezza del catetere che utilizzerai, la cura e l'attenzione che presterai al tuo autocateterismo.

# Elenco delle ditte

In queste pagine troverete l'elenco delle ditte che forniscono ausili per il cateterismo, con caratteristiche dei prodotti e contatti.

- B. Braun Milano S.p.A.
- Bard
- Coloplast S.p.A.
- Hollister S.p.A.
- Manfred Sauer S.r.l.
- Teleflex Medical S.r.l.
- Wellspect HealthCare S.r.l.

# B. Braun Milano S.p.A.

**Indirizzo:** Via Vincenzo da Seregno, 14 20161 Milano

**Riferimenti telefonici:** Tel. 02.662181 (sede Milano)

Cell. 335-7909894 dott.ssa Elisabetta Lazzarini (collaboratore di zona Emilia-Romagna )

**E-Mail:** info@bbraun.com (sede)

elisabetta.lazzarini@bbraun.com (collaboratore di zona)

**Sito web:** www.bbraun.it

## Tipologia di ausili:

Cateteri prelubrificati pronti all'uso per cateterismo intermittente, dotati di guaina NO TOUCH

## Tipologia di lubrificazione dei cateteri:

I cateteri sono prelubrificati con una soluzione di glicerina ed acqua

## Tipologia di punta dei cateteri:

Disponibili sia con punta Nelaton nella versione maschile e femminile sia con punta Tiemann nella sola versione maschile.

## Tipologia di rigidità dei cateteri:

I cateteri della linea Actreen Lite sono in Polivinilcloruro PVC e presentano una flessibilità che risente della temperatura esterna (maggiore flessibilità con l'aumento della temperatura).

I cateteri della linea Actreen Hi-Lite e Actreen Mini (compatto da donna), sono in Poliolefine termoplastiche, dotate di un buon grado di flessibilità, non condizionata dalla temperatura dell'ambiente.

## Tipologia di sistemi no touch dei cateteri:

La guaina di protezione e di confezionamento dei cateteri costituisce anche la guaina NO TOUCH. Dopo la rimozione della parte terminale può essere ripiegata su se stessa mentre si inserisce il catetere nell'uretra. In alternativa si può agevolmente rimuovere una buona parte della guaina lasciandone una porzione di circa 10 cm che scorrendo sul catetere, durante l'inserimento in uretra, impedisce di toccare il catetere durante l'utilizzo.



### **Presenza di sacche integrate nei cateteri:**

I cateteri della linea **Actreen** sono fornibili anche con sacca integrata, sia nella versione mini femminile sia nella versione di lunghezza standard.

Il catetere è collegato direttamente con la sacca di raccolta in modo da evitare eventuali fuoriuscite di urina. E' inoltre presente una valvola antireflusso che impedisce il ritorno di urina verso il catetere. La sacca è dotata di una scala graduata per una corretta misurazione del volume dell'urina e presenta un comodo punto di apertura per il suo svuotamento.

### **Tipologia di condom**

Non disponibili

### **Possibilità di ricevere campioni a domicilio e modalità per la richiesta:**

I campioni possono essere richiesti direttamente al Numero Verde gratuito 800509905.

La campionatura è costituita da una confezione di vendita contenente 30 cateteri che viene inviata unitamente a materiale informativo.

### **Ulteriori offerte (guide, programmi sportivi, ecc.):**

B. Braun ha iniziato un'attività di collaborazione con alcune associazioni sportive dilettantistiche (Tennis, Basket, Canoa, Vela)

Eventuali informazioni sono richiedibili all'indirizzo di posta elettronica:

fabio.pellegrini@bbraun.com

# BD Bard

La linea homecare è distribuita in via esclusiva nazionale da: Siliconcat Srl

**Indirizzo BD Bard:** Via Cina 444 - 00144 Roma

**Indirizzo Siliconcat S.r.l.:** Via di grotte portella 4/8 - 00044 Frascati (Rm)

**Riferimenti telefonici:** Tel. 06.94293924 oppure fax 06.45200048 (Siliconcat)

Numero verde gratuito 800980113

348.3295136 Marco Carugati (Responsabile di zona)

**E-Mail:** info@siliconcat.it (siliconcat)

Ufficio.Marketing@crbard.com (BD Bard)

## Tipologia di ausili:

- Cateteri: MAGIC 3 GO pronti all'uso flessibili in puro silicone rinforzato oppure MAGIC3 flessibile in silicone rinforzato con soluzione salina da attivare
- Urocondom: Spirit, guaina in silicone con autoadesivo idrocolloidale
- Sacche per urina
- Valvole flip flo cateteri a permanenza
- Cateteri a permanenza con palloncino pregonfiato
- Pinza di Cunningham

## Tipologia di lubrificazione dei cateteri:

Magic 3 GO uomo e donna è un catetere pronto all'uso idrofilico in puro silicone rinforzato con una particolare lubrificazione denominata CleanGlide Technology che permette al catetere di essere lubrificato a lungo. Questa tecnologia è la stessa delle lenti a contatto, dunque lubrifica in modo permanente ma allo stesso tempo non bagna e non si perde liquido inutilmente.

## Tipologia di punta dei cateteri:

Punta smussata facilitante con 4 fori drenaggio per un inserimento sicuro e atraumatico.

## Tipologia di rigidità dei cateteri:

Il silicone rinforzato permette di avere un'ottima flessibilità e atraumaticità facilitando però l'inserimento del catetere mediante il suo rinforzo (con silicone) e mediante l'impugnatura no touch del catetere nel caso dell'uomo o del raccordo altamente ergonomico del catetere donna.

## Tipologia di sistemi no touch dei cateteri:

Per il modello uomo, si ha una pratica impugnatura no touch anch'essa in silicone per

facilitarne lo scorrimento e garantire una presa più salda.

Per il modello donna, invece, si ha un raccordo ergonomico che permette di effettuare il cateterismo.

### **Tipologia di condom**

Spirit è un urocondom in silicone con autoadesivo idrocolloidale che permette un'adesione sicura e senza problematiche di lesioni cutanee o irritazioni in quanto è composto da una medicazione avanzata quale l'idrocolloide.

Presente in 3 stili differenti con 5 diametri disponibili.

Stile 3 - lungo circa 8 cm e adesivo idrocolloidale per tutta la lunghezza, misure 25,29,32,36,41 mm

Stile 2 - per pene retrato – lungo circa 5 cm con autoadesivo idrocolloidale per tutta la lunghezza, misure 25,29,32,36,41 mm

Stile 1 - lungo circa 8 cm e autoadesivo idrocolloidale lungo la parte del centrale della guaina, misure 25,29,32,36,41 mm

### **Disponibilità ausili per facilitare il cateterismo e modalità per acquisirli**

Al momento, per il catetere da donna, una volta che viene effettuata la richiesta gratuita di campioni viene inviato gratuitamente uno specchietto facile da usare, facile da posizionare sul wc che garantisce un'ottima visibilità grazie a una luce integrata internamente. Per comodità si prega di segnalare la volontà di ricevere lo specchietto.

### **Modalità di ricevere campioni a domicilio e modalità per la richiesta:**

Chiamando il numero verde 800980113 oppure tramite E-mail [info@siliconcat.it](mailto:info@siliconcat.it)

# Coloplast S.p.A.

**Indirizzo BD Bard:** Via Trattati Comunitari Europei 9 - 40127, Bologna

**Riferimenti telefonici:** Numero verde 800018537 Servizio Assistenza Tecnica  
(Professional)

Numero verde 800064064 Servizio Linea Verde (Utilizzatori)

**E-Mail:** [chiam@coloplast.it](mailto:chiam@coloplast.it)

**Sito web:** [www.coloplast.it](http://www.coloplast.it)

## Tipologia di ausili

Cateteri ad intermittenza (maschili, femminili, pediatrici, compatti e con sacca integrata)

Sacche per la raccolta dell'urina (da letto, da gamba, monouso e riutilizzabili)

Guaine peniene per l'incontinenza urinaria maschile

Sistema per l'irrigazione transanale con unità di controllo "Peristeen"

## Tipologia di lubrificazione dei cateteri

I cateteri SpeediCath sono autolubrificanti: già immersi in soluzione fisiologica sterile per l'attivazione del rivestimento lubrificante. Questo sistema è finalizzato a rendere più rapida la preparazione del catetere e a mantenerlo lubrificato più a lungo

## Tipologia di punta dei cateteri

Nelaton (SpeediCath, nelle versioni standard e compatte, con e senza sacca integrata).

Tiemann (SpeediCath nella versione standard)

Flessibile (SpeediCath Flex)

## Tipologia di rigidità dei cateteri

Sono disponibili diversi tipi di rigidità: da SpeediCath Compact Uomo e SpeediCath Control che hanno una parte più rigida per aumentare il controllo durante il cateterismo a SpeediCath Flex, morbido e flessibile in ogni sua parte. La gamma dei cateteri SpeediCath standard, ha invece una tipologia di rigidità intermedia.

## Tipologia di sistemi no touch dei cateteri

Cateterismo dal raccordo: i cateteri SpeediCath sono stati progettati per non dover mai toccare il catetere durante l'inserimento. Questo è stato reso possibile dalla specifica rigidità dei cateteri che consente l'utilizzo dei dispositivi semplicemente afferrandoli dal raccordo

Guida protettiva: SpeediCath Flex ha una guida protettiva che riveste tutto il corpo del catetere e che consente di gestire al meglio la flessibilità e morbidezza del catetere

stesso senza mai toccare il catetere.

### **Presenza di sacche integrate nei cateteri**

SpeediCath Compact Set è presente sia nella versione per uomo che per donna. È un catetere compatto e pronto all'uso che consente di praticare il cateterismo ovunque.

### **Tipologia di condom**

Conveen **Optima** guaina peniena in silicone (sistema anti perdite, confezione a scatto, adesivo bilanciato, anche nella versione short), con doppia linguetta per un facile posizionamento.

### **Disponibilità ausili per facilitare il cateterismo e modalità per acquisirli**

- GripCath: maniglia per il cateterismo
- Conveen Specchietto: per l'autocateterismo delle donne
- Conveen Pantler: stampella abbassa indumenti

### **Possibilità di ricevere campioni a domicilio e modalità per la richiesta:**

contattando numero verde

### **Ulteriori offerte:**

Possibilità di partecipazione ad eventi di volo e ad altre attività sportive (vela, tennis...) nei mesi più caldi e di fare un'esperienza di sci sulla neve nei mesi invernali.

# Hollister S.p.A.

**Indirizzo:** Strada 4, Palazzo A7, 20090 Milanofiori – Assago (Milano)

**Riferimenti telefonici:** Tel. 02 8228181 (centralino)

Tel. 02 82281832 / FAX 02 57502829 (servizio clienti)

Numero verde 800836088 / Tel. 02 82281895 (servizio pazienti)

FAX 800.00.37.60 (servizio pazienti)

**E-Mail:** serviziopazienti@hollister.com (per pazienti)

**Sito web:** [www.hollister.it/it-it/continencecare](http://www.hollister.it/it-it/continencecare)

Consulente per Pazienti Donato Dalla Porta Cell. 348 2331323

## Tipologia di ausili

### Cateteri Intermittenti

- VAPRO POCKET e VAPRO POCKET PLUS (con o senza sacca integrata): Catetere Autolubrificante Idrofilo in PVP, con tecnologia Vaprofilica, Pronto all'Uso e sterile, in confezione POCKET tascabile (discreto e comodo da portare con se), con guaina e punta protettive (Protezione: l'unico che assicura un cateterismo 100% NO-TOUCH "qualunque cosa tocchi non toccherà il Catetere VaPro"); CH da 10 a 14 con punta Nelaton.
- ONLI e ONLI PLUS (con o senza sacca integrata di raccolta): Catetere Autolubrificante Idrofilo in PVP, con Tecnologia Vaprofilica, Pronto all'Uso e sterile, dotato di Gripper che ne permette l'utilizzo con tecnica No-Touch; CH da 08 a 16 (in versione maschile, lungo 40 cm) e CH da 08 a 14 (in versione Femminile, lungo 17 cm) con punta Nelaton.
- ADVANCE e ADVANCE PLUS (con o senza sacca integrata di raccolta): Catetere Autolubrificante a base di Gel, con guaina e punta protettive (Protezione No-Touch); CH da 08 a 16 (in versione Maschile, lungo 40 cm) e CH da 06 a 14 (in versione Femminile e Bambino, lungo 20 cm), con punta Nelaton e Tiemann

### Sacche Urina

- Sacca da letto a fondo chiuso: Sacca Graduata da 2 Litri, con e senza Antireflusso, lunghezza del tubo 90 cm o 130 cm, Raccordo Universale; Presenza di Fori per il Supporto, Maniglia/Supporto compresa in ogni confezione.
- Sacca da letto con rubinetto di scarico: Sacca Graduata da 2 Litri, lunghezza del tubo 90 cm o 130 cm, Raccordo Universale; Presenza di Fori per il Supporto, Maniglia/Supporto compreso in ogni confezione.
- Sacca da gamba monouso: Sacca Graduata da 500 mL o 700 mL, con Sistema

Antireflusso e di Scarico, lunghezza del tubo da 10cm o da 35cm, Raccordo Universale, Presenza di Fori per Lacci, Set di Lacci compreso in ogni confezione

## Condom

- INVIEW: Condom (Catetere Esterno) Autoadesivo, 100% in Silicone in confezione singola per incontinenza maschile; misure da 25mm a 41mm; tipologia Standard (con Adesivo Standard), Tipologia Extra (adesivo Extra per maggiore resistenza) o Tipologia Special (più corto per dimensioni ridotte).
- MALE URINARY POUCH: Sacca per pene retrato, per incontinenza maschile; Idrocolloide Soft Flex; film antiodore; drenaggio universale con tappo integrato; salvietta protettiva no alcool inclusa; confezione singola.

## Tipologia di lubrificazione dei cateteri

- VAPRO POCKET, VAPRO POCKET PLUS, ONLI e ONLI PLUS sono Cateteri Idrofilici Pronti all'Uso (non è necessaria nessuna manovra aggiuntiva per attivare la lubrificazione), sono prodotti con tecnologia vaprofilica: il Vapore Acqueo Sterile attiva il rivestimento Idrofilico del catetere garantendo la massima lubrificazione durante l'inserimento e riducendo al minimo le fuoriuscite di liquidi dalla confezione, ovvero non sporca, non macchia i vestiti e sono inodore.
- ADVANCE e ADVANCE PLUS sono Cateteri con lubrificazione a Gel.

## Tipologia di punta dei cateteri

VAPRO POCKET, VAPRO POCKET PLUS, ONLI e ONLI PLUS hanno Punta Nelaton.  
ADVANCE e ADVANCE PLUS hanno Punta Nelaton e Punta Tiemann.

## Tipologia di rigidità dei cateteri

- VAPRO POCKET e VAPRO POCKET PLUS sono dispositivi flessibili, progettati per non piegarsi nel confezionamento tascabile e che ne consente un facile inserimento in uretra per tutti i tipi di pazienti.
- ONLI, ONLI PLUS, ADVANCE e ADVANCE PLUS sono dispositivi semi rigidi, progettati per consentire un facile inserimento in uretra in tutti i tipi di pazienti.

## Tipologia di sistemi no touch dei cateteri

- VAPRO POCKET e VAPRO POCKET PLUS sono gli unici che assicurano un cateterismo 100% no-touch grazie alla punta e alla guaina protettive ("qualunque cosa tocchi non toccherà i cateteri VaPro"); La Punta Protettiva riduce il rischio di

inserire batteri nelle vie urinarie. La Guaina Protettiva è una barriera per i germi che permette al catetere di essere impugnato in qualsiasi punto senza essere contaminato.

- ONLI e ONLI PLUS nella versione maschile vengono usati con tecnica No-Touch e sono dotati di Gripper Ergonomico, ovvero una guida che scorre sul catetere agevolandone l'inserimento senza doverlo toccare.
- ONLI e ONLI PLUS nella versione femminile presentano un connettore allungato e morbido la cui maneggevolezza consente il perfetto controllo dell'autocaterismo.
- ADVANCE e ADVANCE PLUS forniscono protezione No-Touch grazie alla punta e alla guaina protettive; La Punta Protettiva riduce il rischio di inserire batteri nelle vie urinarie. La Guaina Protettiva è una barriera per i germi che permette al catetere di essere impugnato in qualsiasi punto senza essere contaminato.

### **Presenza di sacche integrate nei cateteri**

Tutti i Cateteri Hollister sono a disposizione sia nella versione tradizionale sia nella versione con SACCA INTEGRATA per un cateterismo più discreto. La tecnica di utilizzo dei cateteri con o senza sacca è la stessa, ovvero non è necessaria un'ulteriore spiegazione per usare il catetere con sacca integrata.

### **Tipologia di condom**

Inview Standard in silicone: adesivo standard per uso quotidiano (misure 25-29-32-36-41 mm).

Inview Extra in silicone: adesivo doppio per maggiore resistenza (misure 25-29-32-36-41 mm).

Inview special in silicone: lunghezza della guaina ridotta per esigenze speciali (misure 25-29-32-36-41 mm).

Sacca per pene retrato con attacco con placca idrocolloidale Soft Flex ritagl. diam 20-45 mm.

### **Possibilità di ricevere campioni a domicilio e modalità per la richiesta:**

Hollister mette a disposizione un efficiente Servizio Pazienti, che può essere raggiunto con queste modalità:

- Chiamando il Numero Verde 800 83 60 88 dal Lunedì al Venerdì dalle 09:30 alle 17:00
- Collegandosi al sito <https://www.hollister.it/it-IT/Products/Continence-Care-Products> (mettere nel carrello i prodotti da provare e compilare il modulo on-line).



- Scrivendo via mail all'indirizzo: [serviziopazienti@hollister.com](mailto:serviziopazienti@hollister.com) oppure compilando il modulo on-line nella pagina <https://www.hollister.it/it-it/itcontactuspage>
- Inviando un fax al Numero Verde 800 00 37 60
- Inviando un messaggio whatsapp: 339.99.57.770

## ULTERIORI OFFERTE

Hollister si impegna a fare la differenza nel percorso della vita delle persone di tutto il mondo dal 1921. Hollister propone molte soluzioni concrete, basate sui principi fondanti di Dignità della persona, di Servizio, di Integrità e di Affidamento.

Servizio Patient Journey: i nostri consigli e le nostre guide ti aiuteranno per tutto il tuo percorso. Servizio di supporto per l'avvio del piano terapeutico 3482331323.

Sono disponibili molti Strumenti Educativi che spiegano in modo semplice e completo cos'è e come si fa l'Autocateterismo, per aiutare a riacquistare una vita indipendente, dignitosa e appagante:

- Video Educativi
- Opuscoli
- Opuscoli sull'Incontinenza Urinaria
- Guide Cartacee Approfondite di Prodotto
- Diario Minzionale
- Strumenti per il Trasporto comodo e discreto dei Cateteri
- Per il mondo femminile, uno specchietto da gamba (appositamente progettato per rendere l'autocateterismo più facile)

Tutti i materiali e la campionatura dei prodotti, sono GRATUITI e richiedibili al servizio pazienti.

# Manfred Sauer S.r.l.

**Indirizzo:** Via G. Paisiello, 49 – 20037 Paderno Dugnano (MI) (sede legale)  
Viale della Repubblica, 28 – 20037 Paderno Dugnano (MI) (sede operativa)

**Riferimenti telefonici:** Tel. 02.99045678 - FAX 02.91084256

**E-Mail:** info@manfredsauer.it

amministrazione@manfredsauer.it (Contabilità clienti)

silvia@manfredsauer.it (Customer service)

johanna@manfredsauer.it (Assistente Marketing)

angelopretini@manfredsauer.it (Amministratore Unico)

**Sito web:** www.manfredsauer.it (sito italiano)

www.manfred-sauer.com (sito tedesco)

www.manfred-sauer-stiftung.de (Fondazione Manfred Sauer)

## Tipologia di ausili

### Linea continenza urinaria:

Condom in lattice con fissaggio mediante mastice adesivo per pelle o fascette biadesive.  
Condom sintetici autocollanti – tutti i condom hanno 11 misure di diametro dal 18mm a 40 mm.

Sacca raccolta urina da gamba anatomica con capienza da Lt. 1,3 o Lt. 0,7 con diverse tipologie di attacco e di scarico (particolarmente adatta per utenti in carrozzina).

Sacca raccolta urina da gamba rettangolare con capienza da Lt. 1,0 o Lt. 0,6 con diverse tipologie di attacco e di scarico (particolarmente adatta per utenti in carrozzina o deambulanti).

Sacca di raccolta urina da letto con capienza Lt. 1,5 o Lt. 2.0.

Accessori per la cura della pelle (pulizia e protezione della pelle).

### Linea cateteri monouso autolubrificanti:

IQ-CATH Cateteri autolubrificanti a base di acqua (soluzione salina) o a base di gel.

## Tipologia di lubrificazione dei cateteri

Cateteri a base di acqua: hanno un rivestimento idrofilo a base di PVP (Polivinilpirolidone), il rivestimento rimane sul catetere senza lasciare residui nella mucosa dell'uretra. I cateteri vengono attivati mediante soluzione salina.

Cateteri a base di gel: la superficie del catetere è fatta in modo che la sostanza gelatinosa aderisca uniformemente ed efficacemente. Il gel utilizzato per la lubrificazione del catetere è a base di acqua + idrossietilcellulosa.

### **Tipologia di punta dei cateteri**

Punta del catetere a testa tonda. Grazie alla combinazione tra testa arrotondata e parte anteriore estremamente morbida e flessibile, il catetere IQ-Cath può seguire la via naturale dell'uretra senza esercitare una forte pressione, senza impigliarsi nelle parti più strette, e raggiungere così, praticamente senza ostacoli, lo sfintere.

In questo modo il rischio di traumatismo è ridotto al minimo. In questo modo la testa tonda permette di penetrare perfettamente con un diametro superiore.

### **Tipologia di rigidità dei cateteri**

IQ-CATH presenta una punta a testa tonda (testa arrotondata) di tipo morbida che è fusa con la parte del tubicino di drenaggio. La parte morbida è di cm 13 compresa la testa tonda dopodiché la restante parte del catetere risulta rigida.

Unisce le due caratteristiche positive avendo una parte rigida ed una zona anteriore morbida con testa flessibile. In questo modo l'IQ-Cath può seguire facilmente il percorso dell'uretra ed essere spinto agevolmente, oltrepassando possibili restringimenti o zone problematiche.

### **Tipologia di sistemi no touch dei cateteri**

IQ-CATH è contenuto in una confezione che permette l'utilizzo senza mai toccare il catetere durante l'autocateterismo. Inoltre la confezione che protegge IQ-CATH può essere utilizzata come tubo di drenaggio direttamente nel WC.

### **Presenza di sacche integrate nei cateteri**

IQ-CATH dispone di sacca di raccolta dell'urina con il catetere e il lubrificante integrati nella stessa.

### **Tipologia di condom**

Condom in lattice naturale con fissaggio mediante mastice adesivo per pelle a base di caucciù naturale (8 tipologie) o mastice sintetico (5 tipologie) oppure con fascette biadesive a base idrocolloidale o schiuma di PVC.

Condom sintetici (elastomero sintetico) con fissaggio mediante mastice sintetico (5 tipologie).

Condom sintetici (elastomero sintetico) autocollanti con due tipologie di mastice sintetico di tipo medicale e tre lunghezze di "zona cuscinetto".

### **Disponibilità ausili per facilitare il cateterismo e modalità per acquisirli:**

Ausili per la presa del catetere, per il sostegno per il pene (uomini), divaricatori delle ginocchia, specchi per l'introduzione del catetere (donne).

### **Possibilità di ricevere campioni a domicilio e modalità per la richiesta:**

È possibile ricevere campioni dei dispositivi medici del nostro catalogo facendone richiesta alla email [info](mailto:info) o direttamente al Customer Service tramite email o telefonata.

### **Ulteriori offerte**

Guide, programmi sportivi, ecc.

### **Poster**

“Obiettivo riabilitativo in presenza di lesioni midollari”, curato dalla Fondazione “Manfred Sauer Stiftung” secondo “International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury” (ISNCSCI) Impairment Scale ASIA A

# Teleflex Medical S.r.l.

**Indirizzo:** Via Torino 5 20814 Varedo (MB)

**Riferimenti telefonici:** Tel. 0362.5890233 (sede)

Numero verde 800382643

Cell. 335.1092963 dott.ssa Daria Farinella (referente di zona)

**E-Mail:** [Numeroverde.it@teleflex.com](mailto:Numeroverde.it@teleflex.com)

**Sito web:** [www.teleflex-homecare.it](http://www.teleflex-homecare.it)

## Tipologia di ausili

Linea cateteri monouso:

Liquick X-Treme: catetere idrofilo, pronto all'uso, già attivato. Guaina di protezione integrale su tutta la lunghezza del catetere, per un cateterismo completamente igienico.

Punto di presa. Punta Ergothan. Confezione discreta, non di tipo medicale.

Liquick Base: catetere idrofilo, pronto all'uso, con bustina di fisiologica integrata nella confezione, guaina per cateterismo no touch, punta ergothan.

Liquick Pure: catetere idrofilo, pronto all'uso, compatto, da donna, con bustina di fisiologica integrata nella confezione, guaina per cateterismo no touch, punta ergothan o punta nelaton, confezione discreta, non di tipo medicale.

Flocath Quick: catetere idrofilo, pronto all'uso, con bustina di fisiologica integrata nella confezione, guaina per cateterismo no touch, punta nelaton.

Guaine Esterne: Silko Kondom Ultraflex, Short - Pop-On, Long – Wideband

## Tipologia di lubrificazione dei cateteri

Cateteri Idrofilici pronti all'uso: Flocath Quick, Liquick Base, Liquick Pure,

Cateteri Idrofilici pronti all'uso già attivati: Liquick X-Treme

## Tipologia di punta dei cateteri

Punta Nelaton: Flocath Quick, Liquick Pure

Punta Ergothan Liquick Base, Liquick Pure Liquick X-Treme

Punta Tiemann: Liquick Base

## Tipologia di rigidità dei cateteri

Cateteri Morbidi: Flocath Quick

Cateteri Semi-rigidi: Liquick Base, Liquick Pure, Liquick X-Treme

### Tipologia di sistemi no touch dei cateteri

Guaina parziale che copre solo parte del catetere: Flocath Quick, Liquick Base, Liquick Pure

Guaina totale che ricopre interamente tutta la lunghezza del catetere: Liquick X-Treme

### Presenza di sacche integrate nei cateteri

Liquick Plus: catetere con sacca integrata, disponibile sia con punta nelaton sia con punta ergothan.

### Tipologia di condom

Silko Kondom: catetere esterno in silicone 100%, autoadesivo ed autoportante.

Disponibile in tre versioni: con la parte adesiva sui 2/3 della superficie Ultraflex, con la parte adesiva su 1/3 della superficie Short - Pop-On per pene retrato, con la parte adesiva sui 3/3 della superficie Long – Wideband per chi fa attività sportiva.

### Disponibilità ausili per facilitare il cateterismo e modalità per acquisirli:

FreeHand: abbassa pantaloni. Allontana gli abiti dai genitali, consentendo di avere le mani libere per la manovra di cateterismo.

LegFix: divaricatore per gambe femminile. Tiene ferme le gambe in modo sicuro durante la manovra di cateterismo.

Ergohand: supporto per inserimento del catetere per utilizzatori tetraplegici.

Opitolux: specchietto da coscia con chiusura in velcro. Facilita l'identificazione dell'ingresso dell'uretra femminile.

Gli accessori sono acquistabili. Vengono forniti gratuitamente agli utilizzatori dei cateteri Teleflex.

### Possibilità di ricevere campioni a domicilio e modalità per la richiesta:

E' possibile richiedere campioni gratuiti in forma anonima e discreta, chiamando il numero verde 800 382643, inviando un fax con il modulo richiesta campioni al fax verde 800-144122, visitando il sito [www.teleflex-homecare.it](http://www.teleflex-homecare.it) nella sezione richiedi campioni, o scrivendo all'indirizzo email [numeroverde.it@teleflex.com](mailto:numeroverde.it@teleflex.com)

### Ulteriori offerte

Guide, programmi sportivi, ecc. Teleflex è partner della associazione sportiva Freerider, con la quale organizza eventi sportivi dedicati alle persone con mielolesione. In particolare organizza nel periodo invernale 10 eventi sciistici nelle principali località alpine e appenniniche su tutto il territorio italiano e nel periodo estivo una settimana dedicata allo sport per i ragazzi con spina bifida.

# Wellspect HealthCare

divisione di Dentsply Sirona Italia S.r.l.

**Indirizzo:** Via Isonzo 65 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)

**Riferimenti telefonici:** Numero verde 800010601 (Customer Care per l'assistenza tecnica agli Utilizzatori)

Referenti per Montecatone:

Francesco Zanangeli Cell. 347.3878825 (Responsabile di zona)

Fabiola Molla Cell. 347.6550761 (Line Specialist area irrigazione transanale)

**E-Mail:** lofric.it@wellspect.com (per utilizzatori)  
order.it@wellspect.com (per invio ordini)

**Sito web:** www.wellspect.it

## Tipologia di ausili

Cateteri autolubrificanti idrofili pronti all'uso per cateterismo intermittente:

LoFric Origo: catetere da uomo e da ragazzo

LoFric Elle: catetere da donna

LoFric Sense catetere da donna e ragazza,

LoFric Hydrokit catetere con sacca integrata graduata per uomo, donna e ragazzo.

Sistema per l'irrigazione transanale con unità di controllo elettronica Navina Smart. Tutti i prodotti sono privi di PVC, ftalati e lattice.

## Tipologia di lubrificazione dei cateteri

Tutti i cateteri della gamma LoFric hanno un esclusivo rivestimento superficiale denominato Urotonic™ Surface Technology che garantisce un'elevata scivolosità durante tutte le fasi del cateterismo minimizzando il rischio di microtraumi e complicanze nell'utilizzo a lungo termine. La lubrificazione del catetere si ottiene grazie ad una soluzione sterile di soluti, contenuta nella confezione, che attiva la superficie idrofilica del catetere al momento del suo utilizzo.

## Tipologia di punta dei cateteri

I cateteri per uomo sono disponibili nelle versioni con punta Nelaton e punta Tiemann.

I cateteri per donna e bambino sono disponibili nella versione con punta Nelaton.

## Tipologia di rigidità dei cateteri

I cateteri LoFric hanno una rigidità che garantisce una maneggevolezza ideale da parte dell'utilizzatore riducendo al contempo il rischio di microtraumi nell'utilizzo a lungo termine. Il GRIP sterile di LoFric Origo e l'impugnatura sterile di LoFric Sense consentono

inoltre un controllo ottimale del catetere durante tutte le fasi del cateterismo. LoFric Elle è dotato di un'innovativa impugnatura che facilita l'igiene, migliora il controllo e tutela la sfera intima della donna che deve fare autocateterismo.

### **Tipologia di sistemi no touch dei cateteri**

Il catetere LoFric Origo è dotato di una speciale guaina sterile chiamata GRIP che facilita tutte le fasi del cateterismo e in particolare evita il contatto delle dita del paziente con il catetere.

Il catetere LoFric Elle grazie all'impugnatura garantisce la tecnica No-Touch in quanto le mani di chi fa il cateterismo rimangono lontane dal corpo del catetere. L'impugnatura favorisce anche l'igiene in quanto le mani sono lontane dal punto di fuoriuscita dell'urina, se il cateterismo viene fatto sulla toilette le mani non entrano nella toilette.

Il catetere LoFric Sense è dotato di una speciale impugnatura sterile che facilita tutte le fasi del cateterismo e in particolare evita il contatto delle dita della paziente con il catetere.

Se utilizzato in abbinamento con lo specchietto LoFric facilita l'apprendimento del CIC in quanto garantisce una migliore visibilità del meato uretrale.

### **Presenza di sacche integrate nei cateteri**

I cateteri LoFric Hydrokit disponibili per uomo, donna e bambino sono dotati di una sacca integrata graduata (1000ml).

### **Tipologia di condom**

Al momento la gamma prodotti non prevede i condom.

### **Disponibilità ausili per facilitare il cateterismo e modalità per acquisirli:**

Alle donne che iniziano il cateterismo viene fornito un pratico specchio da gamba utile a favorire l'introduzione del catetere nel meato uretrale.

Agli uomini con manualità compromessa viene fornita una pinza per facilitare l'autonomia.

Come benvenuto vengono date salviette disinfettanti, bag e pochette per il trasporto discreto dei cateteri.

### **Possibilità di ricevere campioni a domicilio e modalità per la richiesta:**

Contattare il Customer Care al Numero Verde gratuito 800-010601 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30 con orario continuato

[www.wellspect.it/chi-siamo/contatti](http://www.wellspect.it/chi-siamo/contatti)



## Ulteriori offerte

Guide, programmi sportivi, ecc.

Programma di supporto Wellspect With You per gli Utilizzatori che comprende anche:

- il servizio di educazione terapeutica al cateterismo intermittente con LoFric e alla irrigazione transanale con Navina Systems, Insiemeate, svolto da infermieri specializzati adeguatamente formati ed erogato al domicilio della persona, presso il centro clinico o da remoto.
- il servizio di consegna domiciliare che consente di ricevere la fornitura direttamente a casa, su appuntamento e con consegna al piano, garantendo una distribuzione capillare, qualità e tempi di risposta certi.

Guide al cateterismo intermittente disponibile in formato cartaceo con versione dedicata per uomo e per donna e guida all'irrigazione transanale

Blue Book: 201 risposte alla mielolesione disponibile sia in formato cartaceo che elettronico (CD).

La pubblicazione ad opera di professionisti sanitari contiene le domande e le relative risposte di approfondimento sui vari aspetti della lesione midollare.

Mettiamo a disposizione il sito [www.wellspect.it](http://www.wellspect.it) dedicato con informazioni sulle aree terapeutiche, sui prodotti, e animazioni video esplicative sull'utilizzo dei dispositivi e delle procedure per eseguire la terapia, differenziati in base a sesso ed età. I video sono disponibili anche sul canale YouTube al link:

[www.youtube.com/channel/UCjJO02PB5pKL3aLQG9E3dRA](http://www.youtube.com/channel/UCjJO02PB5pKL3aLQG9E3dRA)

Inoltre mettiamo a disposizione un Blog disponibile anche su Facebook di informazione [blog.wellspect.it/](http://blog.wellspect.it/) con rubriche dedicate a:

Informazioni sulle terapie

Storie di vita di utilizzatori

Buone pratiche (igiene, alimentazione)

Sport e iniziative delle associazioni di pazienti

Sono inoltre disponibili due pubblicazioni realizzate da coordinatrici infermieristiche delle Unità Spinali di tutta Italia relative una al cateterismo e l'altra alla gestione intestinale.









**Istituto di Montecatone  
Ospedale di Riabilitazione**

Via Montecatone, 37  
40026 Imola (Bo) Italy  
Tel. +39 0542.632811  
Fax +39 0542.632805

info@montecatone.com  
www.montecatone.com

